

in
ns
s

AMP

in
ns
s

BUP

id
ni
ai

BZD

in
ns
s

COC

in
in
s

COT

id
ds
s

ETG

ūl
ils
s

FYL

D

LSD

in
ns
s

MET

id
sti
ai

OPI

p
e
s

THC

ol
s
s

TML




AINETE KURITARVITAMISE KIIRTEST

KODUSEKS KASUTAMISEKS

ĀTRAIS NARKOTISKO VIELU TESTS LIETOŠANAI MĀJAS APSTĀKĻOS

GREITĀSIS KVAIŠALŪ TESTAS NAUDOJIMUI NAMUOSE

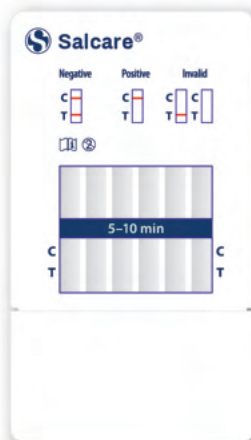

Salcare® Ainete kuritarvitamise kodune kiirtest KASUTUSJUHEND

**Lugege see kasutusjuhend enne testi tegemist hoolikalt läbi
ja säilitage hiljem kasutamiseks.**

TOOTJA JA TURUSTAJA

SALOFA OY

Satamakatu 16, 24100 Salo, Finland

info@salofa.com

www.salofa.com

KASUTUSNÄIDUSTUS

Salcare® ainete kuritarvitamise kiirtest on mõeldud 12 testitava aine tuvastamiseks (10 uimastit, alkohol ja tubakatooted) inimuriinis.


Test on mõeldud eristama negatiivset tulemust positiivsest tulemusest. Testiga ei saa määrata testitavate ainete kontsentratsiooni. Testiga ei saa mõõta joobe määra, vaid ainult alkoholi kasutust.

Seoses ainete kuritarvitamise kiirtestiga tuleb kaaluda järgmisi asjaolusid:

Positiivne tulemus osutab ainult testitava aine olemasolule testiproovis, mitte joobe määrale ega testitava aine kasutamise levimusele.

Võib juhtuda, et testimisel tehtud viga või muu mittetestitava aine olemasolu uriiniproovis mõjutab testitulemust ja annab valepositiivse tulemuse. Seetõttu on soovitatav pöörduda vajadusel omavalitsuse ainete kuritarvitamise talituse poole, et olukorraga lähemalt tutvuda.

TESTKASSETT

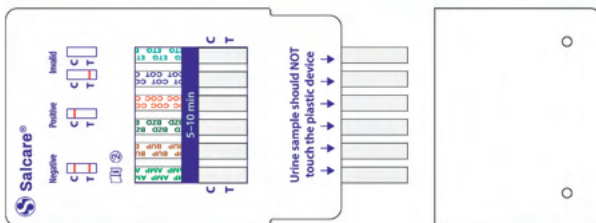

**TESTKASSETT JA
KONTROLLALAD**

**TEST-
RIBAD
12 TK.**

**TESTKASSETI
KATE**

TESTITAVAD AINED

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| Amfetamiin | AMP | |
| Buprenorphiin | BUP | nt Subutex |
| Bensodiasepiinid | BZD | rahustid |
| Kokaiin | COC | |
| Kotiniin | COT | tubakatooted |
| Etüül-glükuroniid | ETG | alkohol |
| Fentanüül | FYL | |
| LSD | LSD | |
| Metamfetamiin | MET | |
| Opiaadid | OPI | |
| Kanep | THC | |
| Tramadol | TML | valuvaigisti |

PAKENDI SISU JA MUUD VAJALIKUD VAHENDID

Pakendi sisu

- Üks fooliumpakis testkassett. Lisaks testkassetile sisaldab fooliumpakk kuivatusaine pakki.
- Kasutusjuhend

Muud testiks vajalikud vahendid, mida pakend ei sisalda:

- Kuiv ja puhas anum uriiniproovi jaoks;
- Kell või taimer aja arvestamiseks.

TOOTE HOIUSTAMINE JA KÕRVALDAMINE

- Hoidke külmikus või toatemperatuuril (+2 – +30 °C).
- Hoidke lastele kättesaamatus ja mitternähtavas kohas.
- Toote aegumiskuupäev on märgitud välispakendile ja testkasseti fooliumpakile.
- Kasutatud ja aegunud tooted ning pakendid tuleb kõrvaldada kooskõlas jäätmekäitluseeskirjadega. Toode ei tohi visata looduskeskkonda.
- Kartongpakend ja juhend: paberjätmed.
- Fooliumpakk, testkassett ja kuivatusaine pakk: segaolmejäätmed.

KAALUTLUSED/ETTEVAATUSABINÕUD

- Ärge taaskasutage, kuna toode on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
- Testkasseti fooliumpakki ei tohi avada enne testi läbiviimist.
- Testi ajal veenduge, et uriiniproov ei puutuks kokku testkasseti plastosaga.
- Vältimaks ribade kahjustamist ja saastumist, ärge puudutage nende lahtisi otsi.
- Veenduge, et uriiniproov ei satuks testkasseti testaknasse, sest isegi pritsmed muudavad testi kasutuskõlbmatuks.
- Tagage testi ajal ja järel käte puhtus ning uriiniprooviga kokkupuutunud materjalide nõuetekohane puhastus või kõrvaldamine.
- Ärge kasutage testi pärast tootel märgitud aegumiskuupäeva.
- Ärge kasutage testkassetti, kui fooliumpakk on kahjustatud.
- Järgige testile kuluvat aega (5–10 min), enne kui alustate tulemuste tõlgendamist.
- Lugege tulemusi testkasseti esi- ja tagaküljelt.

TESTI LÄBIVIIMINE

Veenduge enne testi läbiviimist, et testkassett oleks toatemperatuuril.

1. Koguge uuriniproov kuiva ja puhtasse anumasse.

Uriiniproov tuleb koguda nii, et pärast seda saaks testi võimalikult ruttu läbi viia.

2. Avage testkasseti fooliumpakk ja eemaldage sellest testkassett.


Testkasseti plastosa sisaldab 12 testriba: 6 kasseti esiküljel ja 6 selle tagaküljel. Testribade lahtistel otstel on katted, mis kaitsevad neid saastumise ja kahjustamise eest. NB! Ärge avage fooliumpakki enne, kui olete valmis testanalüüsi läbiviimiseks.



3. Eemaldage testkasseti kate.


4. Hoidke testribade otsi ligikaudu 30 sekundit uriiniproovi kastetult.

NB! Veenduge, et uriiniproov ei puutuks kokku testkasseti plastosaga. Kui uriiniproov satub testaknale, muutub test kasutuskõlbmatuks.

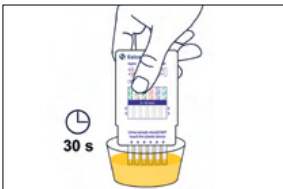

5. Asetage tagasi testkasseti kate.

Asetage testkassett sobivale kindlale horisontaalpinnale.

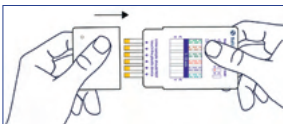

6. Lugege tulemusi 5–10 minuti jooksul pärast testi läbiviimist.

10 minuti järel ei ole testi tulemus enam usaldusväärne. Testkassetil on kummalgi pool 6 reaktsiooniala, st test näitab tulemusi kokku 12 eri aine kohta.



TULEMUSTE TÕLGENDAMINE

Salcare® ainete kuritarvitamise kiirtest võimaldab üheaegselt eraldi tulemust 12 testitava aine kohta. Igat testitavat ainet tõlgendatakse eraldi vastavalt värvilistele joontele selle aine reaktsioonialal. Joonte värvintensiivsus võib varieeruda.

Pärast testi peab reaktsiooniala C-osas olema kontrolljoon, mis osutab testi nõuetekohasele läbiviimisele.



NEGATIIVNE TULEMUS

Proovis ei tuvastatud ühtki ainet.

Testitava aine reaktsioonialal on kaks värvilist joont: üks kontrollalal (C) ja teine testalal (T).



POSITIIVNE TULEMUS

Proovis tuvastati testitavat ainet.

Testitava aine kontrollalal (C) on üks värviline joon. Testalal (T) joont ei esine.




EBASELGE TULEMUS

Tulemus ei ole tõlgendatav.

Kui testitava aine reaktsioonialal ei ole kontrolljoont (C), ei saa testitava aine tulemust tõlgendada.

Usaldusväärse tulemuse saamiseks tuleb vastava aine testi korrata uues testkassetis.

TESTITULEMUSTE NÄITED

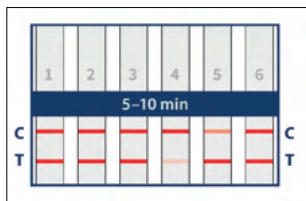


Näide 1

Igal reaktsioonialal on nähtav kontrolljoon (C) ja testjoon (T).

Iga reaktsiooniala tulemus on negatiivne, st proovis ei tuvastatud ühtki testitavat ainet.


Joonte värviintensiivsus võib varieeruda. Joonisel on 4. reaktsiooniala testjoon ja 5. reaktsiooniala kontrolljoon õrnemad, ent siiski loetavad, st tulemus on negatiivne.

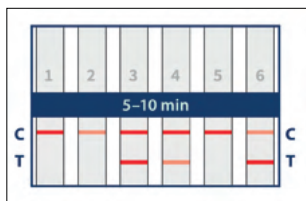

Näide 2

1., 2. ja 5. reaktsiooniala tulemus on positiivne, sest neil on nähtav ainult kontrolljoon (C).

3., 4. ja 6. reaktsioonialas on negatiivne tulemus.

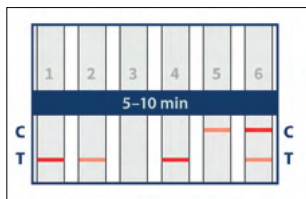

Näide 3

Tulemused ei ole tõlgendatavad

1. – 4. reaktsioonialani, kuna neil pole nähtavat kontrolljoont (C).

5. reaktsiooniala tulemus on positiivne ja 6. reaktsiooniala tulemus negatiivne.

Salcare®

Ātrais narkotisko vielu tests lietošanai mājās apstākļos

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms testa veikšanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākai atsaucēi.

PRODUKTU RAŽO UN TIRGO

SALOFA OY

Satamakatu 16, 24100 Salo, Finland

info@salofa.com

www.salofa.com

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Cilvēka urīnā Salcare® ātrais narkotisko vielu tests ir paredzēts, lai ar testa palīdzību noteiktu 12 vielu klātbūtni (desmit narkotiskās vielas plus alkohola un tabakas izstrādājumu lietošanas klātbūtni).


Testa mērķis ir atšķirt pozitīvu un negatīvu rezultātu. Pārbaudāmo savienojumu koncentrāciju testā nevar noteikt. Tests vienkārši apstiprina alkohola lietošanu; tas nevar noteikt intoksikācijas pakāpi.

Izmantojot ātro narkotisko vielu testu, jāņem vērā:

Pozitīvs rezultāts tikai parāda, ka testa paraugā ir bijusi viela, kuras klātbūtni ar testa palīdzību bija paredzēts noteikt; tas nekvantificē un neparāda, cik bieži viela tiek lietota vai kāda ir cilvēka intoksikācijas pakāpe.

Kļūdaini pozitīvs rezultāts var būt saistīts ar kļūdu, piemēram, procedūras laikā pieļautu kļūdu vai tādu savienojumu klātbūtni urīna paraugā, kas nav atļauto vielu sarakstā. Tāpēc ieteicams sazināties ar pašvaldības dienestu, kas ir atbildīgs par narkotisko vielu testa veikšanu, lai nepieciešamības gadījumā rūpīgāk izpētītu šo situāciju.

TESTA KASETE

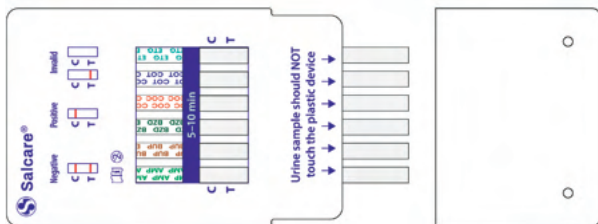

**TESTA LOGS UN
REAKCIJAS ZONAS**

**TEST-
STRĒMELES
12 STK**

**TESTA
KASETES
PĀRSEGS**

TESTĒJAMĀS VIELAS

| | | |
|------------------------|------------|---------------------------|
| Amfetamīns | AMP | |
| Buprenorfīns | BUP | piem., Subutex |
| Benzodiazepīni | BZD | f.eks. beroligende midler |
| Kokaīns | COC | |
| Kotīnīns | COT | tobaksprodukter |
| Etilglikuronīds | ETG | spirts |
| Fentanīls | FYL | |
| LSD | LSD | |
| Metamfetamīns | MET | |
| Opiāti | OPI | |
| Kaņepe | THC | |
| Tramadols | TML | pretsāpju līdzeklis |

IEPAKOJUMA SATURS UN CITS NEPIECIEŠAMĀS APRĪKOJUMS

Produkta iepakojums satur:

- Viena testa kasete folijas iepakojumā. Papildus testa kasetei folijas maisiņā iepakojums satur desikanta maisiņu.
- Pamācība

Papildu rīki, kas nepieciešami testa veikšanai, bet nav iekļauti komplektā:

- Sausais un tīrais trauks urīna paraugam
- Pulkstenis vai taimeris laika skaitīšanai

PRODUKTA UZGLABĀŠANA UN UTILIZĀCIJA

- Uzglabāt ledusskapī vai istabas temperatūrā (+2 – +30 °C).
- Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
- Produkta derīguma termiņš ir norādīts uz testa kasetes ārējā iepakojuma un uz folijas maisiņa.
- Iepakojums un izlietotās sastāvdaļas jāutilizē atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likumiem. Produktu nav atļauts izmest vidē.
- Kartona iepakojums un pamācība: enerģijas atkritumu pārstrāde.
- Folijas maisiņš, testa kasete un desikanta maisiņš: jaukti atkritumi.

APSVĒRUMI / PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Produkts ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai; nelietojiet atkārtoti.
- Ir svarīgi, lai testa kasetes folijas maisiņš paliktu noslēgts līdz testa veikšanai.
- Pārliecinieties, ka testa laikā urīna paraugs nesaskaras ar testa kasetes plastmasas daļu.
- Nepieskarieties strēmeļu atvērtajiem galiem, lai novērstu piesārņojumu un bojājumus.
- Ja urīna paraugs iešļakstās kasetes testa lodziņā, tests vairs nebūs derīgs, tāpēc esiet piesardzīgs.
- Pārliecinieties, ka ievērojat labu roku higiēnu gan testa laikā, gan pēc tā, kā arī pareizi utilizējāt vai notīriet visus priekšmetus, kas nonākuši saskarē ar urīna paraugu.
- Testu nedrīkst izmantot pēc produkta norādītā derīguma termiņa beigām.
- Ja testa kasetes folijas maisiņš ir bojāts, nelietojiet testu.
- Pirms rezultātu interpretācijas ir jāievēro testa veikšanas laiks, kas ir 5 līdz 10 minūtes.
- Pārbaudiet rezultātus testa kasetes priekšpusē un aizmugurē.

TESTA PROCEDŪRA

Pirms testa veikšanas pārliecinieties, vai testa kasete atradās istabas temperatūrā.

1. Savāciet urīna paraugu tīrā, sausā traukā.


Urīna paraugi ir jāņem tā, lai testēšana sāktos pēc iespējas ātrāk pēc savākšanas.

2. Atveriet testa kasetes folijas maisiņu un izņemiet testa kaseti no maisiņa. Testa kasete plastmasas apvalkā ir 12 teststrēmeles, sešas priekšpusē un sešas aizmugurē. Lai pasargātu no piesārņojuma un bojājumiem, teststrēmelēm ir pārsegs uz to atklātajiem galiem. Ievēro labi! Kamēr neesat gatavs veikt testa analīzi, neatveriet folijas maisiņu.


3. Noņemiet testa kasetes pārsegu.



4. Apmēram 30 sekundes turiet teststrēmeles galus urīna paraugā. Ievēro labi! Pārliecinieties, ka paraugs atrodas prom no plastmasas daļas. Testa rezultāti kļūst nelietojami, ja paraugs tieši saskaras ar testa logu.

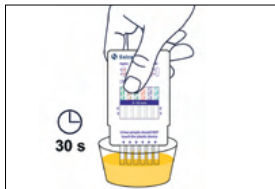

5. Uzlieciet atpakaļ testa kasetes pārsegu. Testa kasete ir jānovieto uz piemērotas, līdzenas, cietas virsmas.

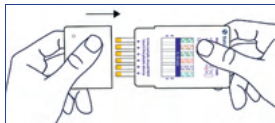

6. Nolasiet rezultātus 5–10 minūšu laikā pēc testa veikšanas.

Rezultāts nav ticami nolasāms pēc 10 minūtēm. Katrā testa kasetes pusē ir sešas reakcijas zonas, tāpēc testā tiek parādīti kopumā divpadsmit dažādu vielu rezultāti.



REZULTĀTU INTERPRETĀCIJA

Salcare® ātrais narkotisko vielu tests sniedz atsevišķus rezultātus 12 testa vielām vienlaikus. Pamatojoties uz krāsainajām līnijām, kas parādās katras testa vielas reakcijas laukumā, tiek interpretēts katras vielas unikālais rezultāts. Līniju krāsas intensitāte var atšķirties.

Katra testa materiāla reakcijas zonā pie C pēc testa jābūt redzamai kontroles līnijai. Šajā gadījumā var apstiprināt, ka tests ir veikts pareizi.



NEGATĪVS REZULTĀTS

Paraugā netika atrasta neviena viela.

Testa vielas reakcijas laukumam ir divas krāsainas līnijas: viena testa līnijas zonā (T) un otra kontroles līnijas zonā (C).



POZITĪVS REZULTĀTS

Paraugā tika noteikta testa viela.

Testa vielas kontroles līnijas zonā (C) parādās krāsaina līnija.

Testa līnijas zonā (T) neparādās neviena līnija.




NEVEIKSMĪGS REZULTĀTS

Rezultātu nevar interpretēt.

Testa vielas rezultāta interpretācija nav iespējama, ja reakcijas zonā nav redzama kontroles līnija (C).

Testa vielas noteikšana jāveic no jauna, izmantojot jaunu testa kaseti, lai iegūtu pareizo rezultātu.

TESTA REZULTĀTU PIEMĒRI

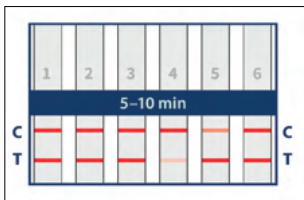


1. piemērs

Katrā reakcijas zonā tiek parādīta testa līnija (T) un kontroles līnija (C).

Katrā atbildes reakcijas zonā testa rezultāts ir negatīvs, kas nozīmē, ka paraugā nav atrasta neviena testējamā viela.


Līniju krāsas intensitāte var atšķirties. Kontroles līnija reakcijas zonā 5 un testa līnija reakcijas zonā 4 attēlā nav izteikti redzamas, bet, ja abas līnijas ir nolasāmas, rezultāts ir negatīvs.

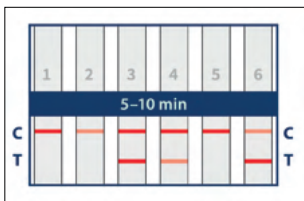

2. piemērs

Pirmajā, otrajā un piektajā reakcijas zonā ir redzama tikai kontroles līnija (C), kas norāda uz pozitīvu rezultātu šajās zonās.

3., 4. un 6. reakcijas zonā ir negatīvs rezultāts.

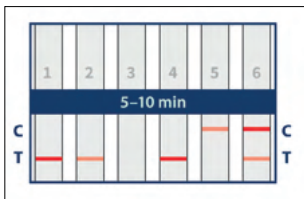

3. piemērs

1.– 4. reakcijas zonās rezultāti nav interpretējami, jo kontroles līnija (C) nav redzama. 5. reakcijas zonā ir pozitīvs rezultāts, savukārt 6. reakcijas zonā ir negatīvs rezultāts.

Salcare® Greitasis kvaišalų testas naudojimui namuose NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš atlikdami testą
ir išsaugokite instrukciją vėlesniam naudojimui.**

GAMINTOJAS IR PLATINTOJAS

SALOFA OY

Satamakatu 16, 24100 Salo, Finland

info@salofa.com

www.salofa.com

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Greitasis kvaišalų testas Salcare® yra skirtas 12 tiriamųjų medžiagų (10 narkotinių medžiagų bei alkoholio ir tabako gaminių) aptikimui žmogaus šlapime.


Testas yra numatytas atskirti neigiamą rezultatą nuo teigiamo rezultato. Testu negalima nustatyti girtumo laipsnio. Galima tik konstatuoti alkoholio vartojimą. Testas taip pat neparodo kitų tiriamų medžiagų kiekio, o tik jų buvimą mėginyje.

Greitojo kvaišalų testo pateiktuose rezultatuose svarbu atkreipti dėmesį į:

Teigiamas rezultatas tik parodo tiriamosios medžiagos buvimą mėginyje, tačiau nereiškia apsvaigimo ir neparodo tiriamosios medžiagos vartojimo dažnumo.

Įmanoma, kad testo atlikimo metu įsivėlusį klaidą arba šlapimo mėginyje esančios kitos medžiagos, kurių nėra tiriamųjų medžiagų sąrašė, gali sutrikdyti testą arba klaidingai pateikti teigiamą rezultatą. Dėl to rekomenduojama teigiamo rezultato atveju susisiekti su vietine kvaišalų kontrolės tarnyba dėl situacijos patikslinimo.

TESTO KASETĖ

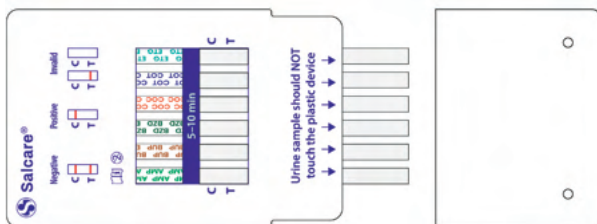

**TESTO LANGELIS
IR REAKCIJOS
ZONOS**

**TESTO
JUOSTELĖS
12 VNT.**

**TESTO
KASETĖS
APSAUGINĖ
DALIS**

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------|
| Amfetaminas | AMP | |
| Buprenofinas | BUP | pvz. Subutex |
| Benzodiazepinai | BZD | raminamieji vaistai |
| Kokainas | COC | |
| Kotininas | COT | tabako gaminiai |
| Etilgliukoronidas | ETG | alkoholis |
| Fentanilas | FYL | |
| LSD | LSD | |
| Metamfetaminas | MET | |
| Opiatai | OPI | |
| Kanapės | THC | |
| Tramadolis | TML | nuskausminamieji vaistai |

GAMINIO PAKUOTĖS TURINYS IR KITOS REIKIAMOS PRIEMONĖS

Gaminio pakuotės turinys:

- Viena testo kasetė plastikinėje pakuotėje. Plastikinėje pakuotėje, be testo kasetės, yra taip pat drėgmės sugėriklis.
- Naudojimo instrukcija

Priemonės, reikalingos testui atlikti, kurių nėra gaminio pakuotėje:

- Sausas ir švarus indas šlapimo mėginiui
- Laikrodis arba laikmatis laiko skaičiavimui

GAMINIO LAIKYMAS IR UTILIZAVIMAS

- Laikyti šaldytuve arba kambario temperatūroje (+2 – +30 °C).
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nematomoje vietoje.
- Gaminio galiojimo laiko paskutinė diena pažymėta ant gaminio pakuotės ir ant testo kasetės plastikinės pakuotės.
- Panaudotas ar pasenęs gaminys ir jo pakuotė turi būti utilizuoti pagal atliekų rūšiavimo nurodymus. Gaminio negalima išmesti į aplinką.
- Dėžutė ir naudojimo instrukcija: kartono ir popieriaus atliekos.
- Plastikinė pakuotė, testo kasetė ir drėgmės sugėriklis: mišrios atliekos.

SVARBIOS DETALĖS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Gaminys skirtas vienkartiniam naudojimui.
- Testo kasetės plastikinės pakuotės negalima atidaryti iki testo panaudojimo.
- Testo atlikimo metu pasirūpinti, kad šlapimo mėginys neturėtų sąlyčio su testo kasetės plastikine dalimi.
- Nelieskite juostelių atvirų galiukų, kad išvengtumėte juostelių pažeidimo ir kontaminacijos.
- Pasirūpinkite, kad net menkiausias lašelis šlapimo mėginio nepatektų į testo langelio sritį, kitaip testas bus nebetinkamas naudoti.
- Testo atlikimo metu ir po jo pasirūpinkite rankų higiena ir su šlapimo mėginiu sąlytį turėjusių medžiagų valymu arba šalinimu.
- Nenaudokite testo pasibaigus nurodytam galiojimo laikui.
- Nenaudokite testo kasetės, jei jos plastikinė pakuotė yra pažeista.
- Atkreipkite dėmesį į testo atlikimo laiką (5–10 min) prieš rezultatų analizę.
- Stebėkite rezultatus testo kasetės priekinėje ir užpakalinėje dalyje.

TESTO ATLIKIMAS

Prieš testo atlikimą įsitikinkite, kad testo kasetė yra kambario temperatūros.

1. Surinkite šlapimo mėginį į sausą ir švarų indą.


Šlapimo mėginį reikia surinkti taip, kad testą galima būtų atlikti kaip įmanoma greičiau po mėginio surinkimo.

2. Atidarykite testo kasetės plastikinę pakuotę ir išimkite iš jos kasetę. Testo kasetės plastikiniame dėkle yra 12 testo juostelių, iš kurių 6 yra kasetės priekinėje dalyje ir 6 kasetės užpakalinėje dalyje. Testo juostelių atviruose galiukuose yra apsauga, kuri saugo jas nuo kontaminacijos ir pažeidimų. Dėmesio! Neatidarykite plastikinės pakuotės, kol nesate pasiruošę atlikti testą.


3. Pašalinkite testo kasetės apsauginę dalį.



4. Laikykite testo juostelių galiukus šlapimo mėginyje apie 30 sekundžių. Dėmesio! Testo atlikimo metu pasirūpinti, kad šlapimo mėginys neturėtų sąlyčio su testo kasetės plastikine dalimi. Jei šlapimo mėginys pateks į tiesioginį sąlytį su testo langeliu, testas tampa nebetinkamas naudojimui.

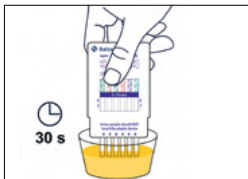

5. Pritvirtinkite testo kasetės apsaugą į skirtoje vietoje. Padėkite testo kasetę ant lygaus ir kieto paviršiaus.

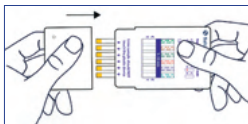

6. Stebėkite rezultatus po 5–10 minučių po testo atlikimo.

Rezultatas nėra patikimas po 10 minučių. Reakcijos zonos yra testo kasetės abiejose pusėse, t.y. testas parodo bendrai 12 skirtingų medžiagų rezultata.



REZULTATŲ AIŠKINIMAS

Greitojo kvaišalų testo Salcare® pagalba gaunamas tuo pačiu metu 12 skirtingų medžiagų rezultatas. Kiekviena tiriamoji medžiaga duoda atskirą rezultatą savo reakcijos zonoje pagal atsirandančius spalvotus brūkšnius. Brūkšnių spalvos ryškumas gali skirtis.

Po testo atlikimo visų tiriamųjų medžiagų reakcijos zonoje turi būti matomas kontrolinis brūkšnys (C). Tada galima patvirtinti, kad testas veikė teisingai.



NEIGIAMAS REZULTATAS

Mėginyje tiriamoji medžiaga neaptikta.

Tiriamosios medžiagos reakcijos zonoje atsiranda du spalvoti brūkšniai, vienas iš jų – kontrolinis (C), kitas – testo brūkšnys (T).



TEIGIAMAS REZULTATAS

Mėginyje tiriamoji medžiaga aptikta.

Tiriamosios medžiagos kontrolinio brūkšnio vietoje atsiranda spalvotas brūkšnys (C). Testo brūkšnio vietoje (T) brūkšnys neatsiranda.




NEPAVYKĘS REZULTATAS

Rezultato negalima paaiškinti.

Jei tiriamosios medžiagos reakcijos zonoje nepasirodo kontrolinis brūkšnys (C), medžiagos rezultato negalima paaiškinti.

Tiriamosios medžiagos priimtino rezultato gavimui reikia atlikti pakartotinį testą su nauja testo kasete.

TESTO REZULTATŲ PAVYZDŽIAI

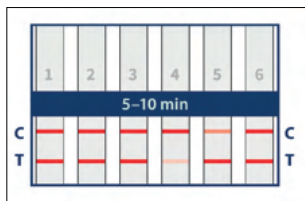


Pavyzdys Nr. 1

Kiekvienoje reakcijos zonoje matomas tiek kontrolinis (C), tiek testo brūkšny (T).


Kiekvienos reakcijos zonos rezultatas yra neigiamas, t.y. mėginyje tiriamosios medžiagos neaptiktos.

Brūkšnių spalvos ryškumas gali skirtis. Iliustracijoje reakcijos zonos nr. 4 testo brūkšny ir reakcijos zonos nr. 5 kontrolinis brūkšny matomi silpniau, bet jei abu brūkšniai įskaitomi, rezultatas yra neigiamas.

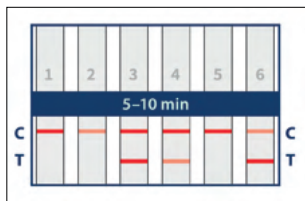

Pavyzdys Nr. 2

Pirmosios, antrosios ir penktosios reakcijos zonos rezultatas yra teigiamas, kadangi šiose reakcijos zonose yra matomas tik kontrolinis brūkšny (C). Reakcijos zonų nr. 3, nr. 4 ir nr. 6 rezultatas yra neigiamas.

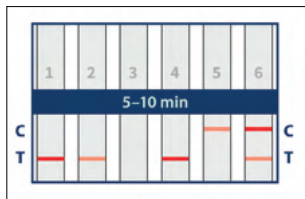

Pavyzdys Nr. 3

Reakcijos zonų 1–4 rezultatai yra nepaaiškinami, kadangi kontrolinis brūkšny (C) nėra matomas.

Reakcijos zonos nr. 5 rezultatas yra teigiamas ir reakcijos zonos nr. 6 rezultatas yra neigiamas.

**PAKENDIL KASUTATAVAD SÜMBOLID
UZ IEPAKOJUMA IZMANTOTIE SIMBOLI
ANT PAKUOTĒS NAUDOJAMI SIMBOLIAI**



**TOOTJA
RĀZOTĀJS
GAMINTOJAS**



**PARTIINUMBER
PARTIJAS NUMURS
PARTIJU NUMERIAI**



**TOOTE NUMBER
PRODUKTA NUMURS
PRODUKTO NUMERIS**



**LUGEĢE KASUTUSJUHENDIT
IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĀ**



**AEGUMISKUUPĀEV
DERĪGUMA TERMIŅŠ
GALIOJIMO LAIKAS**



**TEMPERATUURI PIIR
TEMPERATŪRAS ROBEŽĀ
TEMPERATŪROS RIBA**



**EI TOHI KORDUVKASUTADA
ATKĀRTOTI NEIZMANTOT
NENAUDOTI PAKARTOTINAI**



**HOIA KUIVAS
UZGLABĀT SAUSUS
LAIKYTI SAUSAI**



**HOIDA EEMAL PĀIKESEVALGUSEST
UZGLABĀT NO SAULES GAIŠMAS
LAIKYTI ATOKIAU NUO SAULĒS ŠVIESOS**



**MITTE KASUTADA, KUI PAKEND ON KAHJUSTATUD
NELIETOT, JA IEPAKOJUMS IR BOJĀTS
NENAUDOKITE, JEI PAKUOTĒ PĀZEISTA**

EE IFU-DOA-1205_V1
LV IFU-DOA-1206_V1
LT IFU-DOA-1207_V1

Amfetamiin
Amfetamīns
Amfetaminas

AM

Buprenorfiin
Buprenorfīns
Buprenofinas

BU

Bensodiasepiīnid
Benzodiazepīni
Benzodiazepīnai

BZ

Kokaiīn
Kokaīns
Kokaīnas

CO

Kotiniīn
Kotīnīn
Kotīninas

CO

Etūūl-glūkuronīid
Etīlglikuronīds
Etīlglikuronīdas

ET

Fetanūūl
Fentanīls
Fentanīlas

FY

LSD

LSD

Metamfetamiīn
Metamfetamīns
Metamfetaminas

ME

Opiāadid
Opiāti
Opiātai

OP

Kanep
Kaņepe
Kanapēs

TH

Tramadol
Tramadols
Tramadolis

TM